




FitMaster AURA PRO

Инструкция по эксплуатации

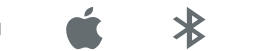

Фитнес-устройство совместимо с ОС Android 4.2 или выше и iOS 8.0 или выше. Поддержка Bluetooth 4.0.


Подготовка устройства к работе.

Перед первым использованием полностью зарядите ваше устройство.

Обратная сторона



Клипса

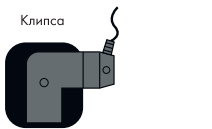

Android



iOS

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение «LEFUN HEALTH» в AppleStore или Google Play*

Включите ваше устройство долгим нажатием на сенсорную кнопку. Убедитесь, что режим BT включен на вашем телефоне. Откройте приложение "LEFUN HEALTH". Нажмите на кнопку меню в левом верхнем углу приложения и увидите список видимых приложений устройств. Выберите ваше устройство для подключения.


После успешного подключения устройство синхронизирует время и дату с вашим смартфоном. Приложение будет синхронизировать ваши спортивные данные, кровяное давление, сердцебиение и т.д.



Коротким нажатием на сенсорную кнопку переключайте функции вашего устройства. Долгим нажатием сенсорной кнопки выключите или включите ваше устройство.


Функции устройства.

Стартовое меню: Время, дата, уровень зарядки

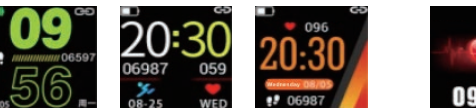


Шагомер:

Подсчет шагов за день. Общий подсчет шагов за все время наблюдений.

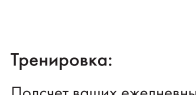

Тренировка:

Подсчет ваших ежедневных упражнений.

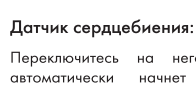


Датчик сердцебиения:

Переключитесь на него и он автоматически начнет подсчет количества ударов сердца в минуту.


Показатель SpO2:

Переключитесь на него и он автоматически начнет измерение SpO2 (уровень насыщения крови кислородом)

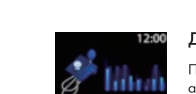

Датчик давления крови:

Переключитесь на измерение вашего артериального давления и он автоматически начнет его измерение.

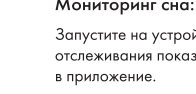

Умный будильник:

Установите будильник через приложение. Устройство будет вибрировать, когда придет время пробуждения.

Напоминание о бездействии:

Установите данный параметр в приложении, чтобы не страдать гиподинамией.

Напоминание о необходимости выпить жидкость:

Установите данный параметр в приложении, чтобы не пропустить время приема воды.

АнтиВор:


Данная настройка позволит уведомить вас о том, что телефон и устройство разорвали соединение.

Поиск устройства:

Нажмите, чтобы начать поиск устройства в пределах его видимости. Он будет вибрировать.


Шагомер:

Подсчет шагов за день. Общий подсчет шагов за все время наблюдений.

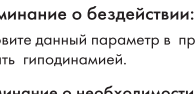

Тренировка:

Подсчет ваших ежедневных упражнений.

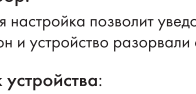


Датчик сердцебиения:

Переключитесь на него и он автоматически начнет подсчет количества ударов сердца в минуту.

Показатель SpO2:

Переключитесь на него и он автоматически начнет измерение SpO2 (уровень насыщения крови кислородом)

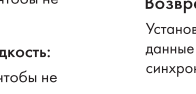

Датчик давления крови:

Переключитесь на измерение вашего артериального давления и он автоматически начнет его измерение.



Умный будильник:

Установите будильник через приложение. Устройство будет вибрировать, когда придет время пробуждения.

Напоминание о бездействии:

Установите данный параметр в приложении, чтобы не страдать гиподинамией.

Напоминание о необходимости выпить жидкость:

Установите данный параметр в приложении, чтобы не пропустить время приема воды.

АнтиВор:

Данная настройка позволит уведомить вас о том, что телефон и устройство разорвали соединение.

Поиск устройства:

Нажмите, чтобы начать поиск устройства в пределах его видимости. Он будет вибрировать.

Сэлфи:

В настройках включите данную функцию и сможете делать сэлфи на свой телефон потряхиванием устройства.

Возврат к заводским настройкам:

Установите предыдущий день в приложении и данные устройства будут очищены путем синхронизации днем позже.

Уведомление о входящих сообщениях:

После соединения с телефоном вы можете получать уведомления о входящих сообщениях (QQ, WeChat, SMS и другие).

Уведомление о входящих звонках:

После соединения с телефоном устройство будет вибрировать при входящих звонках.

Обращаем внимание, что темный загар на коже, растительность на руках могут снижать точность измерений. Если у вас возникли проблемы с точностью измерений, то вы можете перевернуть устройство так, чтобы датчик был закреплен на внутренней части запястья. Обратите внимание, что данные вашего артериального давления, измеряемые устройством, являются справочными и не могут заменить вам профессиональный тонометр.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики данного устройства без предварительного уведомления

* Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc. Apple Store является товарным знаком Apple Inc.

Комплектация: фитнес-устройство FitMaster Aura Pro - 1 шт. Инструкция - 1 шт., зарядное устройство SMPower

Сложное техническое устройство (пластик, металл, резина, электронные компоненты)

Возрастная категория 14+



FitMaster AURA PRO User Manual


SMARTER RRA

Compatible System of Phone and BLE Version:



User Preparation

Please make sure the device is full charged before the first time using.

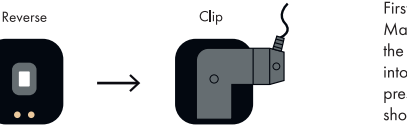

APP "LEFUN HEALTH" Download Scan the QR Code



Can download the app "LEFUN HEALTH" from the APPLE store OR Android market

Device Connection

First Long press the touch button to turn on the device. Make sure the smart phone bluetooth is on. Second, open the "LEFUN HEALTH" APP, press the top left corner, enter into the APP FUNCTION LIST, then press the APP icon, press "Search" choose the right device MAC number will show "Bluetooth pairing request" press "Pair".

Device Operation


When the device sucessfully connected with the phone, the device will syn the phone time date. The APP will syn the device sports datas, heart rate monitoring datas, blood pressure datas and etc






Short press the device touch button to switch the function. Long press the touch button to trun ON/OFF.

Function Instruction

Home Display: Show Time, Date, Battery and etc;

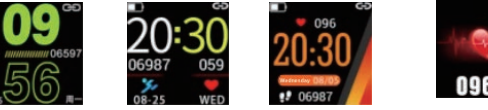

Pedometer

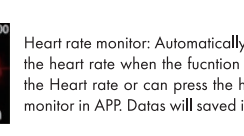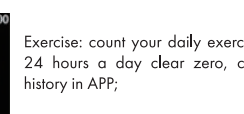
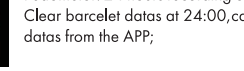


24 hours recording on device. Clear barcelet datas at 24:00,can check; datas from the APP;

Exercise: count your daily exercise Time, 24 hours a day clear zero, can View history in APP;

Heart rate monitor: Automatically measure the heart rate when the fuction switch to the Heart rate or can press the heart rate monitor in APP. Datas will saved in the APP.

SPO2 Test

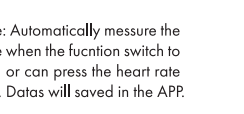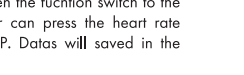

Automatically measure the spO2 rate when the fuction switch to the Heart rate, or can press the heart rate monitor in APP. Datas will saved in the APP.

Blood pressure: Automatically measure the Blood pressure when the fuction switch to the Heart rate, or can press the heart rate monitor in APP. Datas will saved in the APP.

Smart Alarm

Find the "Smart Clock" on APP, set the time, press the time, can set the repeat mode, press complete to save the setting, the device will vibrate when time arrived.

Sleep monitor: Automatically record your sleep status with analyzing the deep sleep and light sleep hours, datas saved in app.

Sedentary Reminder

Open the function in APP and set the time duration, the device will vibrate.

Reminder for drinking: Open the function in APP and set the time duration, the device will vibrate.

Anti-lost: Open the function in APP, the device will vibrate when the phone is taken away.

Message Reminder: Open the function in APP, the device will vibrate when the phone comes a new message (SMS, QQ Facebook, Twitter,Whatsapp,Wechat).

Call Reminder: Open the function in APP, the device will vibrate when the phone comes.

Shake the device to take photo

Open the function in APP, then press the "Shake to take a photo", enter into the camera, shake the device to confirm. (Make sure the mobile Phone setting allow the APP to take photo and save the photo).

Find Device: Press the function in APP the device will vibrate.

Restore factory Settings: set the time to the previous day in the mobile APP or the data of the device can be cleared by synchronizing one day later;

*The company reserves the right to make changes to the contents of the specification without notice.

